


埃索美拉唑钠

目标要求：复核进口注册标准，主峰与杂质间分离度符合要求。

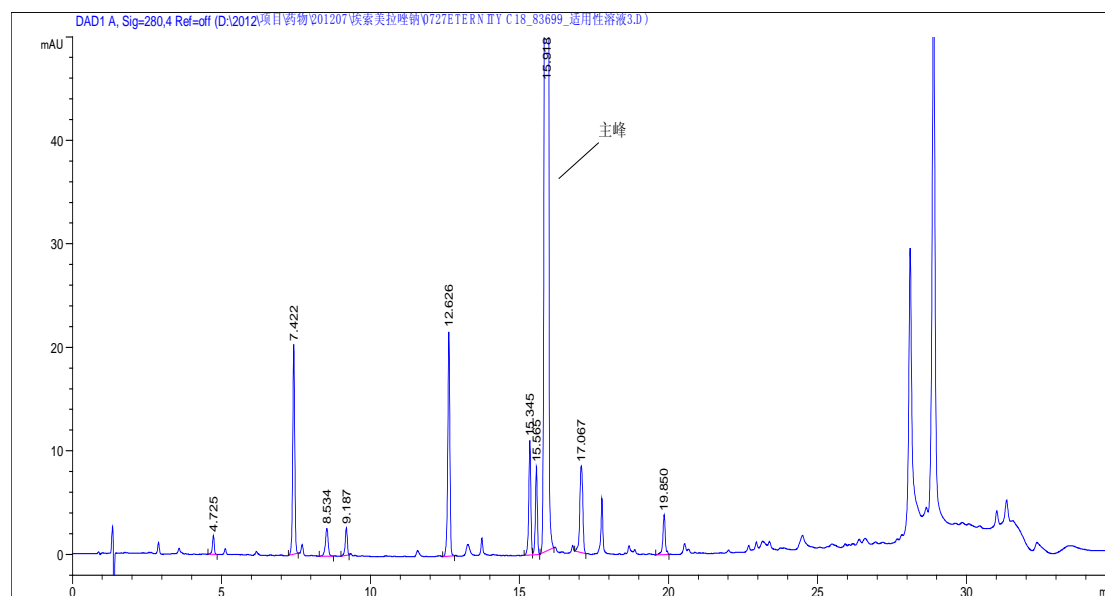

色谱柱: Kromasil Eternity-2.5-C18 ,100*4.6mm 订货号: EH50902

流动相:

A: 乙腈-磷酸盐缓冲液 (pH=7.6, 每 1L 中含磷酸二氢钠 0.0052mol 和磷酸氢二钠 0.032mol) -水 (10:10:80), (V/V/V)

B: 乙腈-磷酸盐缓冲液 (pH=7.6) -水 (80:1:19), (V/V/V)

梯度洗脱程序:

时间	流动相 A (%)	流动相 B (%)
0	100	0
10	80	20
30	0	100
31	100	0
45	100	0

流速: 1.0ml/min

温度: 25°C

检测器: UV 280nm

进样量: 20 μ L