


## 产妇安胶囊（甘草酸单铵）

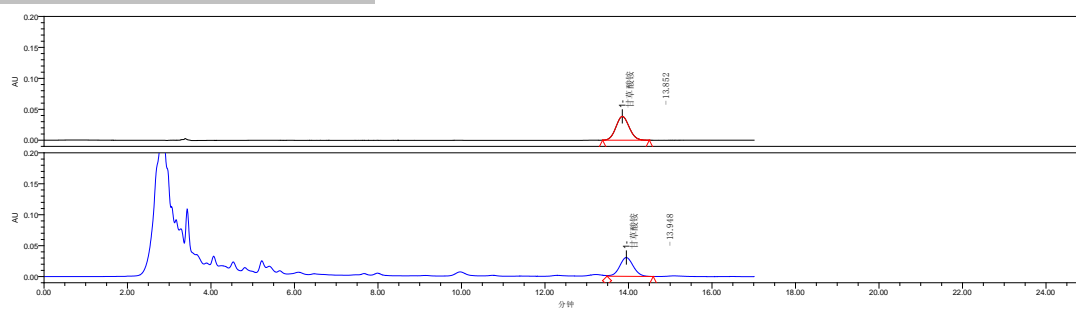

（从上到下依次为：甘草酸铵对照品、产妇安胶囊样品）

色谱条件：

色谱柱：Kromasil 100-5 C18, 250×4.6mm, 订货号 EH04704

流动相：甲醇-0.2mol/L 醋酸铵溶液-冰醋酸（67:33:1）

流速：1.0mL/min 柱温：35℃

检测器：UV250nm 进样量：10μL

理论塔板数：按甘草酸铵峰计为 9000.