


# 厄贝沙坦氢氯噻嗪胶囊

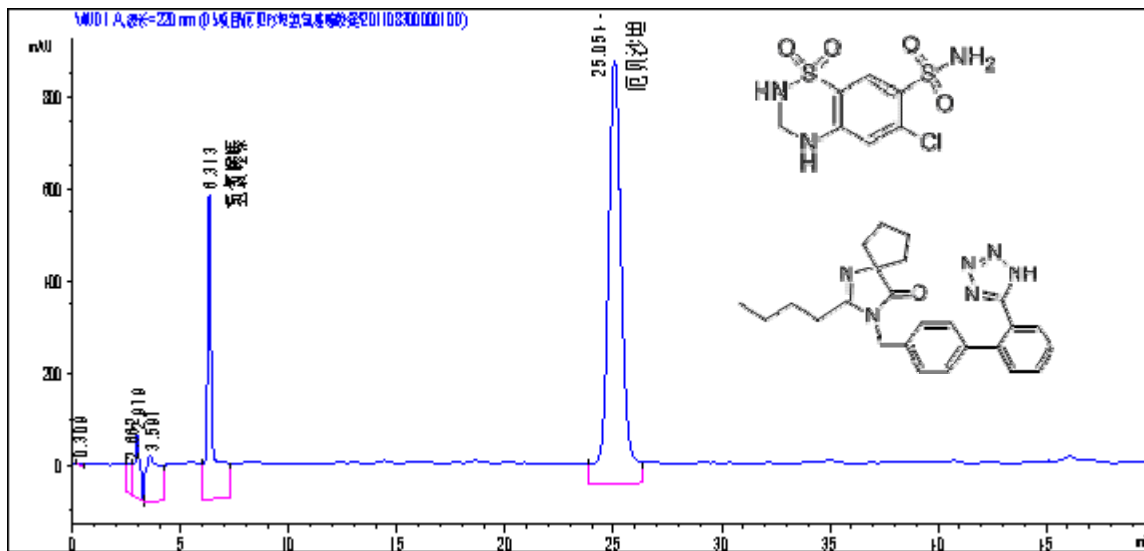

色谱柱: EC 250/4.6 NUCLEODUR 100-5 CN (订货号 EH05704)

流动相: 甲醇: 乙腈: (KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 1.36g H<sub>2</sub>O 900ml 三乙胺 2ml 用磷酸调 pH= 3.0, )

流速: 1.0 ml/min

温度: 40°C

检测器: UV 214nm

进样量 10 $\mu$ L

样品浓度 1mg / ml