


匹伐他汀钙手性分析

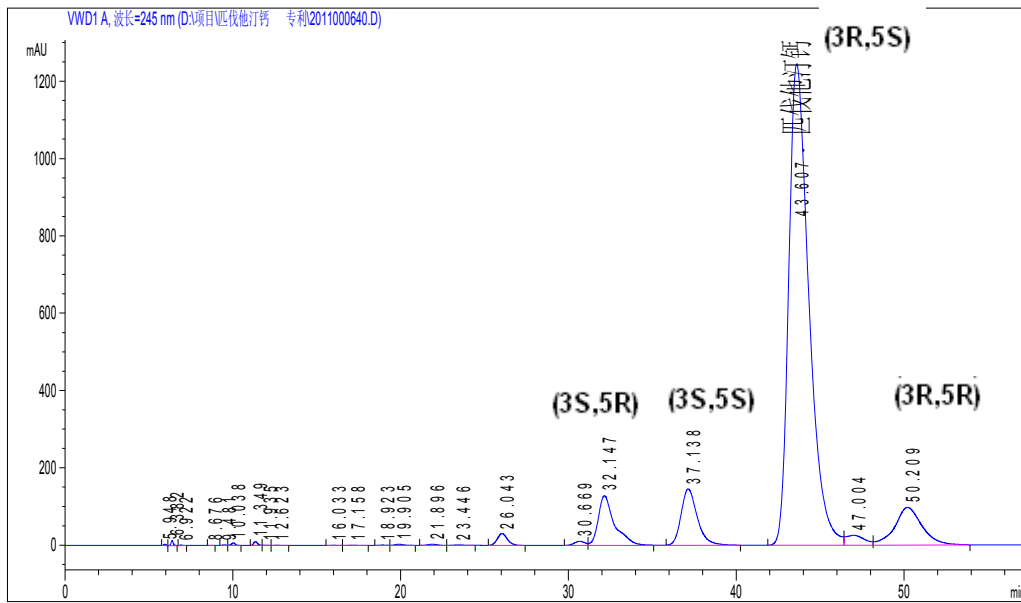

色谱柱; Kromasil 5- Amycoat , 250*4.6mm 订货号 EH3995
流动相; 正己烷 (含 0.1% 三氟乙酸和 0.04% 的三乙胺) : 乙醇 (0.1% 三氟乙酸) =92: 8 (V/V)
流速: 0.5ml/min 温度: 25℃ 检测器: : UV 244nm
进样量 10μL 进样浓度 0.2mg/ml

项目难点:

项目结果: 四个异构体之间分离度均符合要求

主要优点: 良好的柱效和选择性。