



盐酸多奈哌齐

目标要求：对照溶液中，“盐酸多奈哌齐”峰的理论踏板数不低于 40000，拖尾因子不大于 1.5

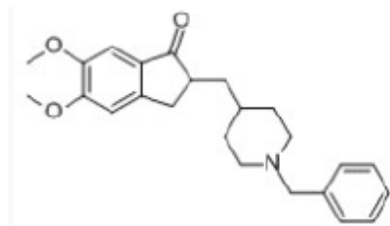

色谱图：

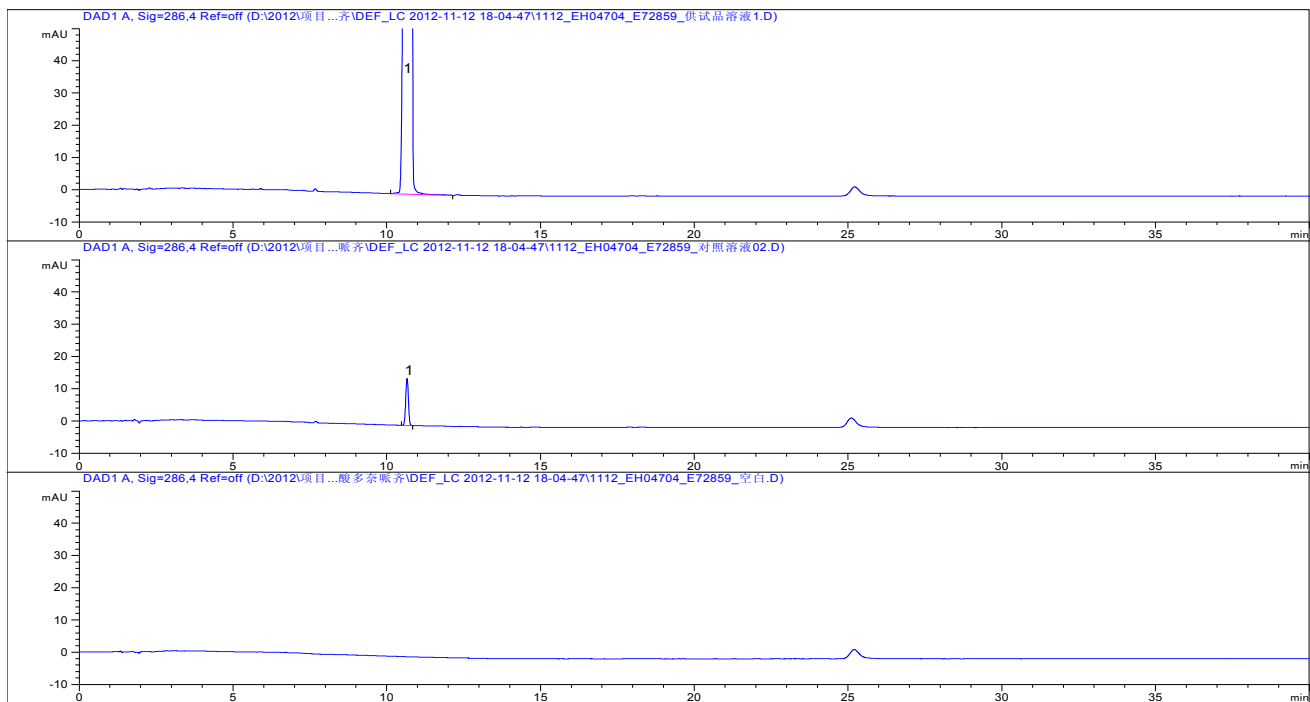

(1) 盐酸多奈哌齐

色谱柱：Kromasil 100-5 C18, 250 x 4.6mm, 订货号：EH04704

流动相 A: 磷酸三乙胺溶液 B: 乙腈

梯度洗脱：

检测器：UV 286nm

温度：50℃

流速：1.5ml/min

进样量：20 μL