


# 辛伐他汀（有关物质和含量-2010 版药典）

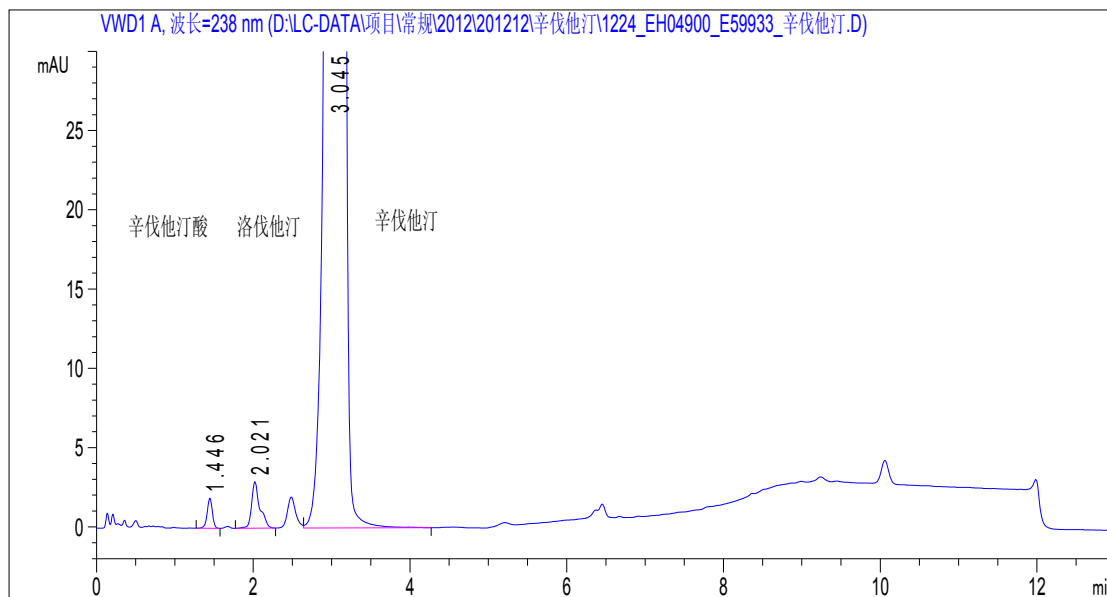

色谱条件:

色谱柱: Kromasil 100-3.5C18, 33×4.6mm 订货号 EH04900

梯度洗脱

流动相 A: 乙腈-0.1%磷酸溶液=50:50 (V/V)

流动相 B: 0.1%磷酸乙腈溶液

流速: 3.0ml/min

温度: 25℃

检测器: UV 238nm

进样量: 10 μ L

结果: 理论塔板数辛伐他汀峰计算是 3633