


纺织品及玩具中 26 种芳香染料

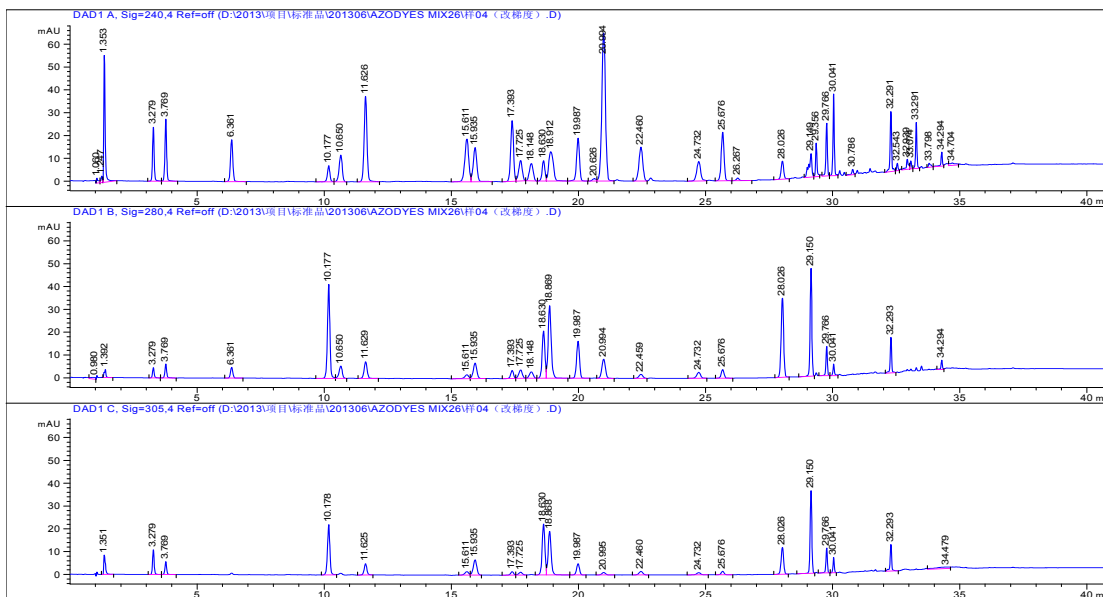

色谱条件:

色谱柱: Kromasil 100-2.5C18 100*4.6mm 订货号: EH04802

梯度洗脱

流动相 A: 甲醇

流动相 B: 0.575g 磷酸二氢铵+0.7g 磷酸氢二钠+100ml 甲醇溶于 1000ml 水中, pH6.9

检测器: UV240nm, 280nm, 305nm 柱温: 30°C

流速: 1ml/min 柱压: 300bar

进样量: 1μL(约 33ppm)