



2015 药典应用目录

21. 夏枯草

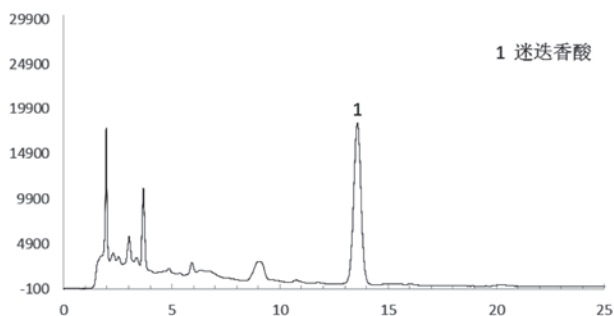


色谱柱: Kromasil 100-5 C18 (150×4.6mm, 5 μm)
流动相: 甲醇-0.1%三氟乙酸溶液(38: 62)
柱温: 30℃
检测波长: 330nm
流速: 1.0ml/min
进样量: 5 μl

22. 知母

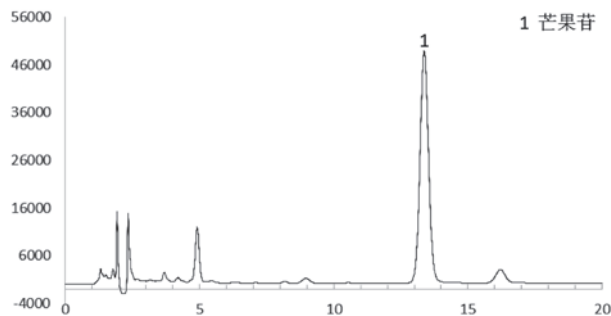

色谱柱: Kromasil 100-5 C18 (150×4.6mm, 5 μm)
流动相: 乙腈-0.2%冰醋酸水溶液(10: 90)
柱温: 30℃
检测波长: 258nm
流速: 1.0ml/min
进样量: 5 μl

23. 黄连生物碱

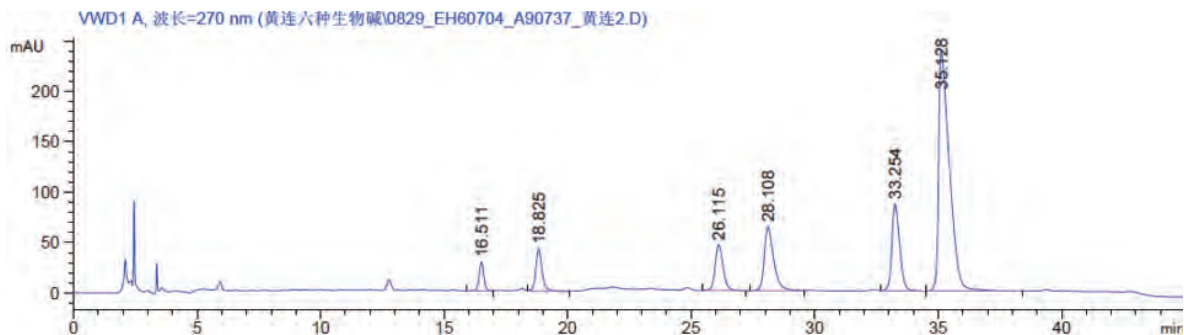

色谱柱: Kromasil XT C18 10um 250x4.6mm
流动相: 乙腈:30mM碳酸氢铵水溶液, 梯度洗脱
流速: 1.0毫升/分钟
进样量: 10ul
柱温: 35℃
检测器: UV270nm